

早期リハビリや機能評価用に


長下肢装具 工具不要/組立式

 TOKUDA ORTHO Tech Inc.

MODULAR LEG BRACE

モジュラーレッグブレース[ネオ]

NEO

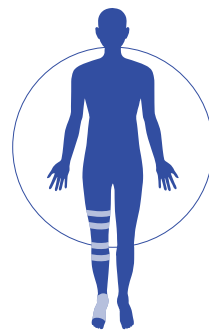

長下肢装具 工具不要/組立式

TOKUDA ORTHO Tech Inc.

MODULAR LEG BRACE NEO

モジュラーレッグブレース[ネオ]



1. 工具不要で優れた身体適合

工具を使用せずに調節可能な各種アジャスト機構を搭載。
(患者様の身体に合わせてその場で調節が可能です。)



目盛付き

▲ハイトアジャスト機構(脚長調整)



目盛付き


▲A-Pアジャスト機構(前後径調整)



M-Lアジャスト機構(内外幅調整)▶

2. 短下肢 ←→ 長下肢 簡便な切り替え

ハイトジャスト機構を開放するだけで
簡便に大腿部の着脱が可能です。

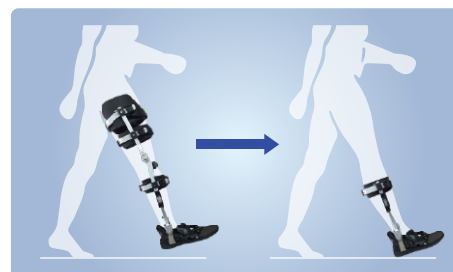

切り替えが可能



3. 優れた足部構造

Boa®を搭載したことで簡便に着脱可能な構造としています。また、専用のシリコンインソールは水洗い可能で衛生的に使用できます。更に、vibram®ソールを採用し、前足部はしなやかでMP部の踏み返しを阻害しません。



4. アルコール除菌対応素材を採用

患者様に接するインタフェース面は全てアルコール除菌
可能で衛生的に使用できます。



《製品規格》 ※ゲイトソリューションのオプションでは脚長調節機構に留意事項がございます。事前にお問い合わせください。

装具の種類	品番	左 / 右	サイズ	足部	身長目安	構造	
						足継手	膝継手
長下肢装具	TO-1001R	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ダブル クレンザック	ダイヤル ロック
	TO-1001L	左					
	TO-1002R	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1002L	左					
短下肢装具	TO-1011R	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ゲイト ソリューション	ダイヤル ロック
	TO-1011L	左					
	TO-1012R	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1012L	左					
長下肢装具	TO-1001R-G	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ゲイト ソリューション	ダイヤル ロック
	TO-1001L-G	左					
	TO-1002R-G	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1002L-G	左					
短下肢装具	TO-1011R-G	右	S-M	22.0~24.5cm	140~170cm	ゲイト ソリューション	ダイヤル ロック
	TO-1011L-G	左					
	TO-1012R-G	右	M-L	25.0~28.0cm	150~180cm		
	TO-1012L-G	左					



体型に
合わせて
調節可能

取扱店

製造

株式会社
徳田義肢製作所

販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865
<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>

