


股関節周囲を優しくサポート

股関節保護装具

G・ASSIST (Gait and Gluteus Assist)


G・アシスト

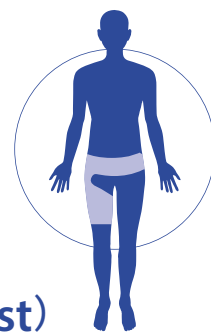

股関節保護装具

G・ASSIST (Gait and Gluteus Assist)

G・アシスト

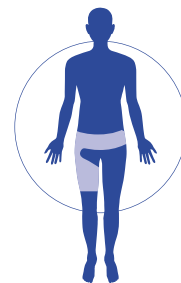

外転補助バンドによる中殿筋と大殿筋の補助

外転補助バンドで中殿筋と大殿筋を補助することにより、側方安定性を向上させます。また、立位時には股関節の軽度伸展を補助し、静止立位の安定性を向上させます。

装具形状をやや外転位に設定

装具がやや外転位になるように裁断しており、かつ、素材の伸張しにくい方向を大腿外側部に配置することで股関節内転に抗するようなデザインとしています。

《適応》

- ・変形性股関節症
- ・大腿骨頭壊死による疼痛
- ・大腿骨頭頸部骨折による疼痛
- ・片麻痺
- ・失調症
- ・脳性麻痺
- ・各種神経筋疾患
- ・二分脊椎

《オプション》

オプションで小児用、両側用もあります。



外転補助バンド

- ・側方安定性の向上
- ・静止立位の安定性を向上

Color   ※色は紺色／ベージュがあります。

《製品規格》 左右別で取り揃えております。

標準サイズ

品番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径(cm)	大腿周径(cm)
TO-160(L/R)	S	65~80	35~45
TO-170(L/R)	M	80~95	45~55
TO-180(L/R)	L	95~120	55~65

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

大腿部が小さいサイズ

大腿周径を10cm小さくした製品

品番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径(cm)	大腿周径(cm)
TO-165(L/R)	S-SS	65~80	25~35
TO-175(L/R)	M-S	80~95	35~45
TO-185(L/R)	L-M	95~120	45~55

※大腿周径は膝上15cmの周径を採寸してください

取扱店

製造・販売元



〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>