


股関節の除痛・保護・免荷

股装具

HIP PROTECTOR

ヒッププロテクター

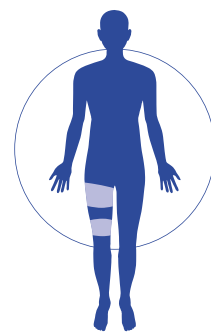

実用新案


登録 第2145286号



股装具

HIP PROTECTOR

ヒッププロテクター

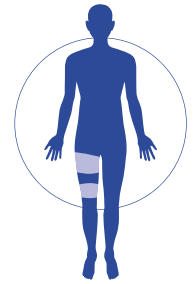

股関節の除痛・保護・免荷への3つのパーツ

大腿ソケット


従来のソケットの前面をカットし、弾力のあるネオプレーンを用いたことで、股関節の運動性が飛躍的に増加しました。また、前面のスカルパ三角の圧迫も前面ストラップにより行われ、坐骨支持による免荷も充分行えます。

支柱

六角レンチ一本で大腿長の無段階調整が可能です。(付属の長い支柱に取り替えることで、大腿長が長い方にも合わせることができます。)これにより、免荷が求められる症例において必要に応じた免荷を得ることが可能です。

顆部ソケット

顆部ソケットを後方に広く開け、前面のみを柔らかいプラスチックとしているため、適合性が良く、幅広い顆部形状にもフィットさせることが可能です。また、後面を開けていることで膝関節屈曲を妨げず、運動性を確保しています。

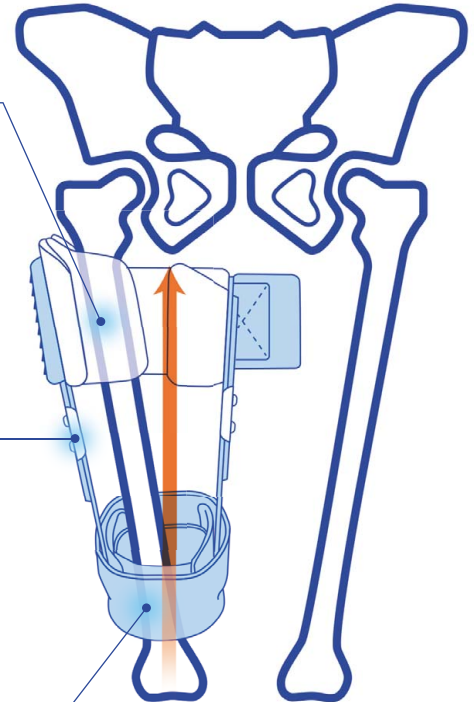

ヒッププロテクターの構造

《適応》

- ・変形性股関節症
- ・大腿骨頭壊死
- ・人工股関節の術後
- ・関節リウマチ
- ・ペルテス病など疼痛緩和、免荷、関節保護や歩容の改善

《製品規格》

品番	サイズ	坐骨部周径 (cm)
TO-100 (L/R)	S	35~45
TO-110 (L/R)	M	45~55
TO-120 (L/R)	L	55~65

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます



取扱店

製造・販売元

 株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>