


股関節周囲を優しくサポート

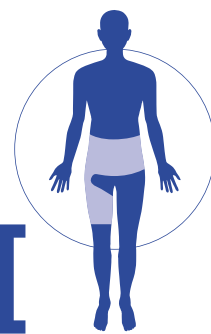

股関節保護装具

HIP PROTECTOR II HARD


ヒッププロテクター II ハード



股関節保護装具

HIP PROTECTOR II HARD

ヒッププロテクター II ハード

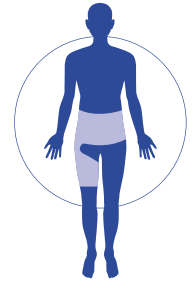

外転モーメントの獲得

骨盤を覆う形状であることに加え、装具の芯材に2mm厚の軟質ポリエチレンを使用しており、これをベースとして外側のダイヤルロック股継手を取り付けられていることで、軟性装具ながら外転モーメントの獲得に成功しています。

より強固な制御が可能

骨盤帯と大腿部を長くすることで股関節中心からのモーメントアームを伸ばし、また板厚3.0mmのステンレス製ダイヤルロックを使用することで、HIP PROTECTOR IIよりも強固な股関節制御が可能になりました。

優れた適合性

軟性素材エアータッチを使用しているため、適合性に優れ、病床においても装着が簡便です。また、通気性にも優れ装着時の不快感を一掃しました。

《適応症状》

- ・変形性股関節症
- ・大腿骨頭壊死による疼痛
- ・人工股関節術後の脱臼予防
- ・関節リウマチによる疼痛

《製品規格》 左右別で取り揃えております。

標準サイズ

品番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径(cm)	大腿周径(cm)
TO-330(L/R)	S	65~80	35~45
TO-340(L/R)	M	80~95	45~55
TO-350(L/R)	L	95~120	55~65

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

大腿部が小さいサイズ

大腿周径を10cm小さくした製品

品番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径(cm)	大腿周径(cm)
TO-335(L/R)	S-SS	65~80	25~35
TO-345(L/R)	M-S	80~95	35~45
TO-355(L/R)	L-M	95~120	45~55

※大腿周径は膝上15cmの周径を採寸してください



ステンレス製
ダイヤルロック
強固な股関節制御

軟性素材
エアータッチ
優れた通気性と
装着感

Color ● ※色は紺色のみです。

取扱店

製造・販売元

 株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>