


手指の拘縮、PIP関節可動域の改善に

指装具

YUBIX


ユビックス

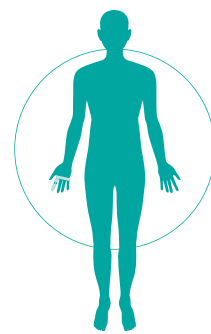

指装具

YUBIX

ユビックス

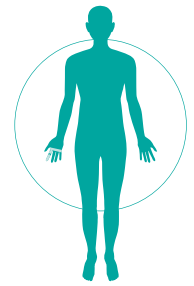

コンパクトなターンバックル


手指の大きさに適したターンバックルでPIP関節の関節可動域の改善に寄与します。

ターンバックル本体の調整幅は0-15mmです。

手掌部で3段階のPIP屈曲・伸展調整が可能

ターンバックル取り付け部はボールジョイントになっており、簡単に段階調整が可能です。

本装具はターンバックルにより指の伸展を行います。ターンバックルの調整幅を越える場合はターンバックル取り付け位置をずらして使用します。

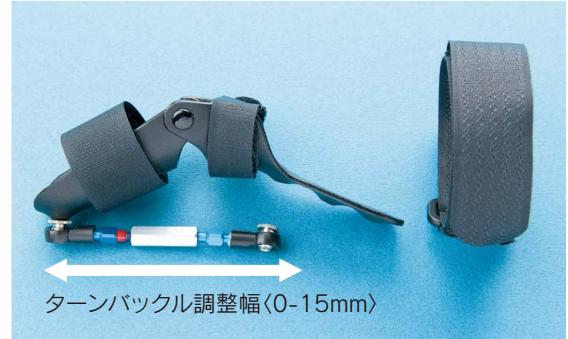

ターンバックル調整幅(0-15mm)



取り付け部は
3段階調整可能


《YUBIX 製品規格》

品番	PIP関節から指先までの長さ	矯正角度	使用ターンバックル
TO-710	4cmまで	0°～80° 屈曲	Sを使用
TO-711	5cmまで	0°～90° 屈曲	
TO-712	6cmまで	0°～90° 屈曲	Mを使用



ターンバックル本体のみの注文も可能

《ターンバックル本体 製品規格》

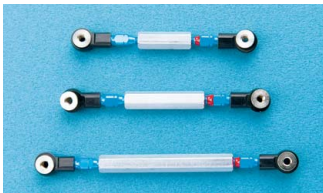

品番	サイズ	調整幅(mm)	重量(g)
TO-705	S	60-75	6
TO-706	M	70-85	8
TO-707	L	90-105	10

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

取扱店

製造・販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>