


サポートベルトで固定力アップ

股関節保護装具


HIP PROTECTOR Plus

ヒッププロテクター プラス

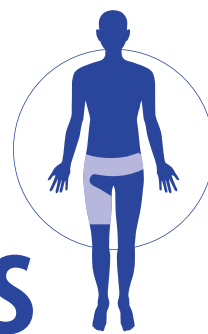

HIP PROTECTOR Plus

ヒッププロテクター プラス

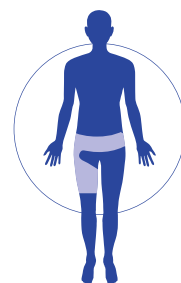

ヒッププロテクター II に 新しい機能をプラス!

1. 骨盤部と大腿部に
通気性のある伸縮性サポートベルトを取り付け、
骨盤と大腿を巻くことにより支持性が向上しました。
2. 装具の幅を骨盤部2cm・大腿部2cm長くし、
さらに固定性を高めました。
3. 認知症やせん妄の患者さんに装着する場合でも
自身で簡単に外すことが難しい構造になっており、
装着保持の向上が図れます。

外転モーメントの獲得

骨盤を覆う形状であることに加え、装具の芯材に2mm厚の軟質ポリエチレンを使用しており、これをベースとして外側のダイヤルロック股継手が取り付けられていることで、軟性装具ながら外転モーメントの獲得に成功しています。

ダイヤルロック股継手を装備

装具外側にダイヤルロック継手を装備することで股関節内転を防止します。また、ダイヤルロックを採用しており、10度刻みで屈曲・伸展制限が可能です。

優れた適合性

軟性素材エアータッチを使用しているため、適合性に優れ、病床においても装着が簡便です。また、通気性にも優れ装着による不快感を一掃しました。

伸縮性
サポートベルトにより
支持力を向上



ダイヤルロック

10度刻みで調整可能

軟性素材
エアータッチ
優れた通気性と
装着感



Color ● ※色は紺色のみです。

《適 応》

- ・変形性股関節症
- ・人工股関節術後の脱臼予防
- ・大腿骨頭壊死による疼痛

《製品規格》 左右別で取り揃えております。

標準サイズ

品 番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径 (cm)	大腿周径 (cm)
TO-135 (L/R)	S	65~80	35~45
TO-145 (L/R)	M	80~95	45~55
TO-155 (L/R)	L	95~120	55~65

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

大腿部が小さいサイズ

大腿周径を10cm小さくした製品

品 番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径 (cm)	大腿周径 (cm)
TO-138 (L/R)	S-SS	65~80	25~35
TO-148 (L/R)	M-S	80~95	35~45
TO-158 (L/R)	L-M	95~120	45~55

※大腿周径は膝上15cmの周径を採寸してください

取扱店

製造・販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<https://www.tokuda-orthotech.co.jp>

