


股関節周囲を優しくサポート

股関節保護装具


HIP PROTECTOR II

ヒッププロテクター II

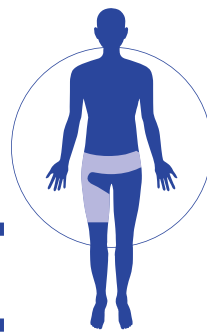

HIP PROTECTOR II

ヒッププロテクター II

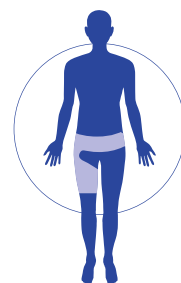

外転モーメントの獲得

骨盤を覆う形状であることに加え、装具の芯材に2mm厚の軟質ポリエチレンを使用しており、これをベースとして外側のダイヤルロック股継手を取り付けられていることで、軟性装具ながら外転モーメントの獲得に成功しています。

ダイヤルロック股継手を装備

装具外側にダイヤルロック継手を装備することで股関節内転を防止します。また、ダイヤルロックを採用しており、10度刻みで屈曲・伸展制限が可能です。

優れた適合性

軟性素材エアータッチを使用しているため、適合性に優れ、病床においても装着が簡便です。
また、通気性にも優れ装着による不快感を一掃しました。

《適 応》

- ・変形性股関節症
- ・大腿骨頭壊死による疼痛
- ・人工股関節術後の脱臼予防
- ・大腿骨頭壊死による疼痛

《オプション》

- ・両側用

《製品規格》 左右別で取り揃えております。

標準サイズ

品 番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径 (cm)	大腿周径 (cm)
TO-130 (L/R)	S	65~80	35~45
TO-140 (L/R)	M	80~95	45~55
TO-150 (L/R)	L	95~120	55~65

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

大腿周径が小さいサイズ 大腿周径を10cm小さくした製品

品 番	サイズ	適用範囲	
		骨盤周径 (cm)	大腿周径 (cm)
TO-133 (L/R)	S	65~80	25~35
TO-143 (L/R)	M	80~95	35~45
TO-153 (L/R)	L	95~120	45~55

※大腿周径は膝上15cmの周径を採寸してください



ダイヤルロック
10度刻みで調整可能

軟性素材
エアータッチ
優れた通気性と
装着感

Color ※色は紺色／ベージュがあります。

取扱店

製造・販売元

株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<http://www.tokuda-orthotech.co.jp>